


Входное отверстие для отвода анестезирующих газов - тип Non Venturi

Входное отверстие для отвода анестезирующих газов SILBERMANN типа Non Venturi предназначено для безопасного удаления излишков анестезирующих газов и взрывоопасных газовых смесей из операционной. Его цель - избежать долгосрочной опасности для здоровья медицинского персонала, подвергающегося воздействию этих газов.

Входное отверстие является типом быстрого подключения, и присоединено к центральной системе AGSS.

Он выдерживает испытания давлением без необходимости использования специальной вилки.

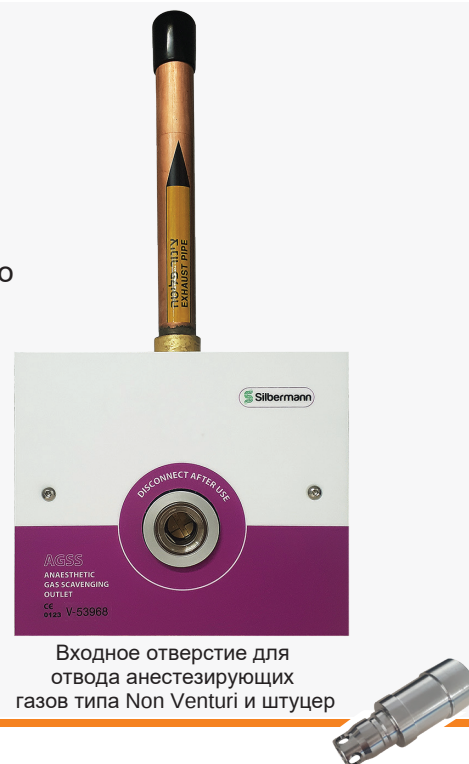

Особенности и преимущества

- Работа на основе центральной системы AGSS
- Внутренний регулировочный кран обеспечивает необходимый поток вакуума
- Очень тихая работа
- Автоматическое отключение при отсоединении штуцера
- Запорный механизм быстрого соединения
- Простая установка
- Простой в обслуживании

Стандарты, которые применяются:

- ISO 9170-2

Система управления качеством Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- CE маркировано

Стандарты медицинских газовых систем:

- ISO 7396-1
- NFPA99
- HTM 02-01
- G0-1



Входное отверстие для отвода анестезирующих газов - тип Non Venturi

Трубопровод для медицинских газов




Техническая Спецификация


- Давление на входе: 3,5-5 бар
- Выходной поток: 40 л/мин.
- Мощность всасывания свободного воздуха: Регулируемая 50 л/мин.
- Уровень вакуума: Регулируемый 20-50 см H₂O
- Диаметр выпускной трубы: Внешний диаметр 7/8", номинальная длина 20 см, тип К.
- **Материал конструкции:**
 - Корпус: Запеченный окрашенный алюминий
 - Передняя панель: Алюминий



Размеры для встроенного/открытого монтажа [мм]

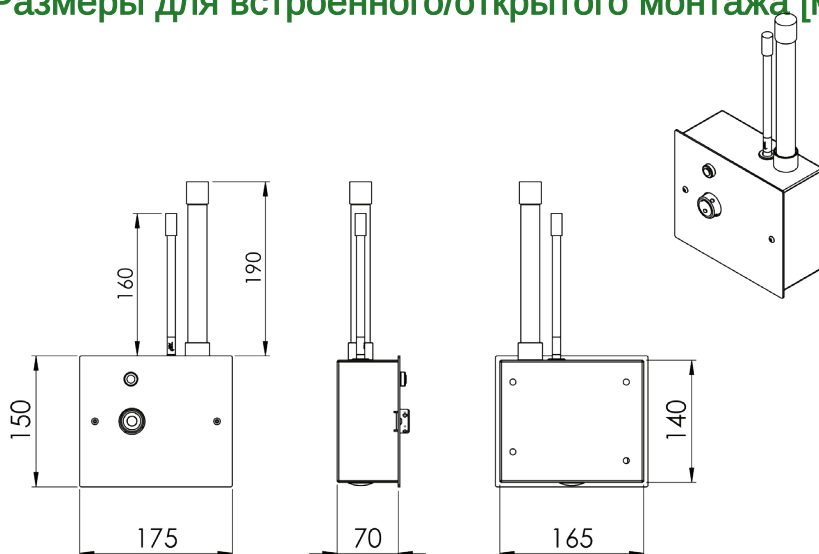

Размеры предохранителя-разъединителя подвешного типа [мм]

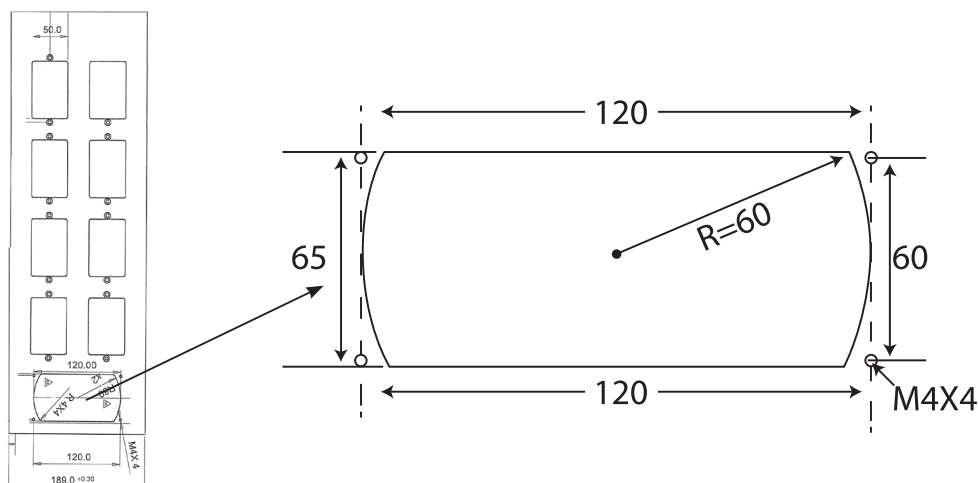

Входное отверстие для отвода анестезирующих газов- тип Non Venturi

Трубопровод для
медицинских газов



Сопутствующие товары

Гибкий шланг в сборе для ОТ

Шланг в сборе длиной 5 метров включает в себя:

- AGSS штуцер
- Гибкий шланг - длина 5 м, диаметр 23 мм.
- Задний адаптер (к анестезиологическому аппарату)



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com